

Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces informations, elles vous aideront à utiliser correctement HYLO® CARE.

HYLO® CARE

Hyaluronate de sodium 1 mg/ml et dexpanthénol

Pour l'hydratation et le soutien de la guérison des lésions de la surface oculaire, par ex. à la suite d'une sécheresse oculaire ou après une intervention chirurgicale.

Solution stérile, sans phosphate et sans agents conservateurs.

Qu'est-ce qu'HYLO® CARE ?

HYLO® CARE est une solution stérile sans agents conservateurs, contenant 1 mg/ml d'hyaluronate de sodium, du dexpanthénol, un tampon citrate et de l'eau.

Pourquoi utiliser HYLO® CARE ?

Pour l'hydratation et le soutien de la guérison des lésions de la surface oculaire, par ex. à la suite d'une sécheresse oculaire ou après une intervention chirurgicale.

Dans quel cas utiliser HYLO® CARE ?

Afin de régénérer et de protéger la santé de l'œil, les tissus extérieurs de l'œil, la conjonctive et la cornée, doivent toujours être humidifiés. Idéalement, ce sont nos larmes qui assurent cette humidification. Parfois, les larmes naturelles sont quantitativement ou qualitativement insuffisantes.

L'œil souffre alors d'hyperémie, de démangeaisons, de sensation de corps étrangers, de brûlures ou de fatigue. Ces signes peuvent apparaître dans un environnement sec ou climatisé, après un traitement médical ou simplement avec l'âge.

Les cellules épithéliales de la cornée et de la conjonctive sont continuellement reconstituées et ce processus fonctionne de manière optimale dans un milieu humide. C'est pourquoi il est important d'humidifier suffisamment la surface de l'œil. Après une intervention chirurgicale ophtalmologique, une bonne hydratation des yeux favorise une cicatrisation optimale des lésions.


Dans tous ces cas, il est judicieux de réhydrater intensivement l'œil par l'application d'HYLO® CARE et de rétablir ainsi l'équilibre de lubrification et d'hydratation naturel de l'œil.

HYLO® CARE contient du sel de sodium d'acide hyaluronique, une substance naturelle présente dans l'œil, mais aussi dans d'autres parties du corps. Grâce à ses propriétés particulières, il forme sur l'œil un film hydratant homogène, stable qui adhère longuement à la surface de l'œil. L'effet hydratant est ainsi prolongé sans gêner la vision. C'est pourquoi vous pouvez utiliser HYLO® CARE sans problème pendant la journée, lorsque les pommades ophtalmiques ne peuvent être utilisées en raison de leur consistance grasse qui trouble la vision.

De plus, HYLO® CARE contient du dexpanthénol, qui appartient à la grande famille des vitamines B. Ce composant couvre les besoins de l'œil en matière de régénération intensive et préserve les propriétés lubrifiantes de l'hyaluronate de sodium. Le dexpanthénol favorise également la cicatrisation. Ainsi, les petites érosions superficielles de la surface oculaire dues à un film lacrymal insuffisant guérissent plus rapidement, tout comme les lésions résultant inévitablement d'une intervention chirurgicale ophtalmologique. HYLO® CARE assure ainsi non seulement une hydratation suffisante de l'œil, mais améliore également la régénération de la cornée et de la conjonctive.

Comment utiliser HYLO® CARE ?


N'utilisez HYLO® CARE que lorsque l'emballage extérieur est scellée de façon intacte avant la première utilisation.

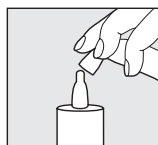

Étape 1


Retirer le capuchon avant chaque utilisation.

Avant la première application d'HYLO® CARE, maintenir le flacon à l'envers avec l'embout compte-gouttes en position verticale et appuyer plusieurs fois sur le fond du flacon jusqu'à ce que la première goutte sorte à l'embout du flacon. Le flacon est ainsi prêt à l'emploi pour les applications suivantes.

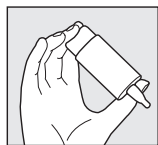


Étape 2

Maintenir le flacon avec l'embout compte-gouttes vers le bas, en plaçant le pouce sur l'épaule du flacon et les autres doigts sur le fond du flacon.

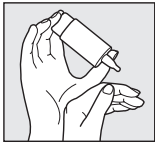


Étape 3

Comme indiqué, soutenir de la main libre la main tenant le flacon COMOD®.

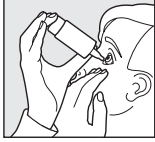

Étape 4

Incliner la tête légèrement en arrière; de la main libre, éloigner délicatement la paupière inférieure de l'œil et appuyer rapidement et vigoureusement au centre du fond du flacon. Ceci actionne le mécanisme de délivrance d'une goutte. Grâce à la technique spéciale de valve du système COMOD®, la taille et la vitesse des gouttes sont toujours identiques, même en cas de pression très forte exercée sur le fond du flacon. Fermer lentement l'œil, afin d'assurer une répartition régulière du liquide à la surface de l'œil.

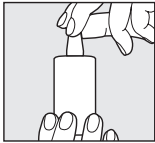

Étape 5

Après utilisation, replacer directement et soigneusement le capuchon sur l'embout compte-gouttes. S'assurer que l'embout compte-gouttes est bien sec. Éviter tout contact entre l'embout compte-gouttes et l'œil ou la peau du visage lors de l'instillation.

Le système COMOD® commercialisé contient 10 ml de solution, ce qui équivaut à 300 gouttes environ.

Pour des raisons techniques, une faible quantité résiduelle de liquide reste toujours dans le flacon.

La durée de traitement avec HYLO® CARE n'est pas limitée.

Le contenu d'un flacon de HYLO® CARE est réservé au traitement d'une seule et même personne.

Quelles sont les consignes d'utilisation complémentaires à respecter ?

En cas de traitement complémentaire avec un autre collyre, un intervalle de 30 minutes au moins doit être respecté entre les deux applications. HYLO® CARE doit toujours être instillé en dernier lieu. Par contre, une pommade ophtalmique doit toujours être appliquée dans le sac conjonctival après HYLO® CARE.

Grâce à l'absence d'agents conservateurs, HYLO® CARE est particulièrement bien toléré même en cas d'utilisation prolongée. Des réactions d'hypersensibilité (sensation de brûlure, larmoiement) ont été rapportées dans de très rares cas, et ont disparu immédiatement après l'arrêt de l'utilisation de HYLO® CARE.

Afin d'éviter des réactions d'intolérances, pouvant être causées par des interactions entre HYLO® CARE et les produits de soin pour lentilles de contact, nous vous conseillons d'attendre environ 30 minutes après la pose des lentilles de contact pour instiller le collyre.

Dans l'état actuel des connaissances scientifiques, HYLO® CARE peut être utilisé sans aucune précaution particulière aussi bien chez l'enfant, que chez la femme enceinte et allaitante.

Quelles sont la posologie et la durée d'utilisation d'HYLO® CARE ?

HYLO® CARE doit être dosé individuellement, selon votre état et/ou les recommandations de l'ophtalmologue ou du pharmacien. En général, il convient d'instiller 1 goutte d'HYLO® CARE trois fois par jour dans le sac conjonctival de chaque œil. En cas de troubles plus importants, HYLO® CARE peut être instillé plus fréquemment. Si vous utilisez HYLO® CARE plus fréquemment (par exemple plus de 10 fois par jour), veuillez consulter un ophtalmologue.

HYLO® CARE convient pour une utilisation à long terme, mais comme pour toute affection, il est recommandé de consulter un ophtalmologue en cas de troubles persistants.

Dans quel cas ne pas utiliser HYLO® CARE ?

HYLO® CARE ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des composants.

Quelles sont les consignes de conservation d'HYLO® CARE ?

À conserver à température ambiante.

HYLO® CARE peut être utilisé pendant 6 mois après ouverture.

Ne pas utiliser après la date de péremption ().

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Les emballages suivants sont disponibles :

10 ml collyre en solution

Dernière mise à jour :

Mars 2013

Fabricant ():

URSAPHARM, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, Allemagne

Distributeur :

Laboratoires URSAPHARM

2, rue Thomas Edison, 67450 Mundolsheim

France

Tél : 06 18 56 44 20

E-Mail : info@ursapharm.fr

www.ursapharm.fr

